

A Iサーモグラフィーカメラ使用方法

【I・接続方法について】

- ① 三脚を立て、カメラ用ACをコンセントへ繋いで下さい。
電源を繋いだ瞬間、カメラ本体からカチッという音と共に、一瞬フラッシュが光ります。
カメラが完全に起動するまでに、およそ3分ほど要します。
- ② 3分ほど経過した後、カメラ側LANポートとPC背面のLANポートを
付属のLANケーブルにて繋いで下さい。
- ③ PC用ACをコンセントに繋ぎ起動して下さい。
スタートアップにログイン画面を登録している為、起動後表示されます。
- ④ 必要に応じカメラに同封の外部スピーカーを接続して下さい。
※異常体温検知時、カメラ本体内部のスピーカーからアラート音声を発しますが、
屋外で使用される際は音が小さい為、必要に応じて接続下さい。


PC背面のLANポート



カメラ側LANコネクタ



サーマルカメラ

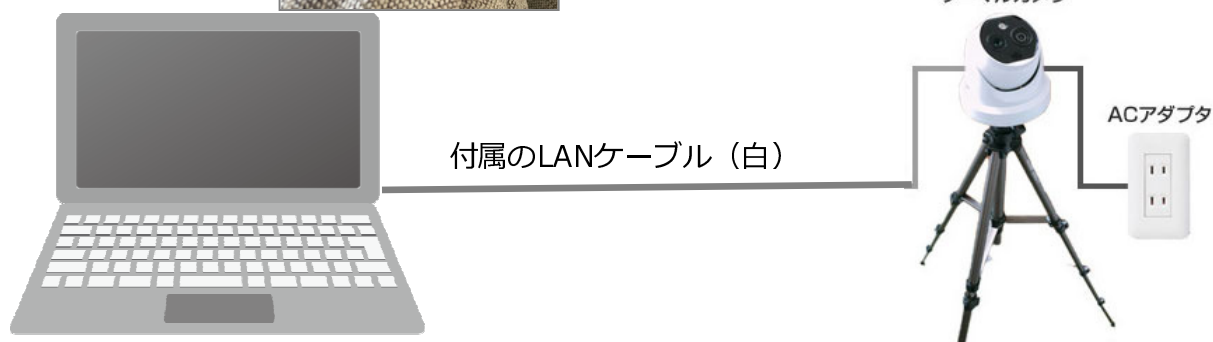

カメラ用ACをコンセントに挿し、3分ほど経過したらPCの電源を入れる。



必要に応じて、同封の外部スピーカーを接続する。

- ・スピーカーのミニピンジャックをカメラ本体の AUDIO OUT へ接続。

※INとOUTがあります、必ずOUTへ接続して下さい。

- ・スピーカーのUSBコネクタをPCのUSB端子に挿し給電。

【Ⅱ・設置設定・起動について】


① 検知範囲について。

- ・カメラの高さ（三脚の高さ）は約1.5m～1.8m
- ・検知距離は約2m

となります。上記を踏まえ、最適な箇所に設置して下さい。

※カメラはおでこを基準に体表面温度を検知します。

おでこを隠すように帽子を被っている場合、検知出来ない事もあります。

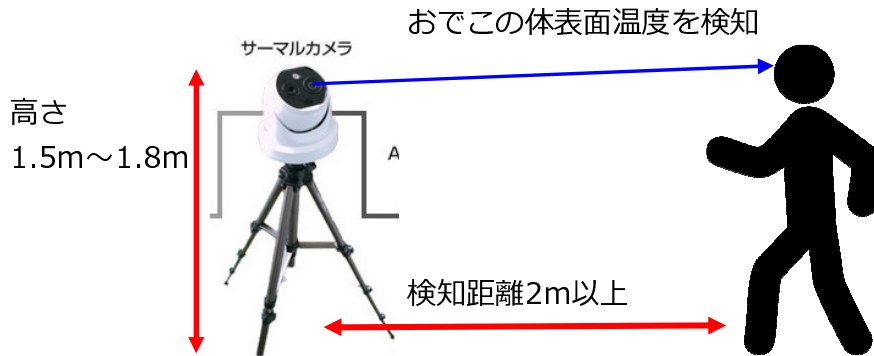


② PCの操作方法

- ・電源を入れ、暫くするとログイン画面が表示されます。

以下を入力しログインボタンを押して下さい。


ユーザー名：user

パスワード：edge1234

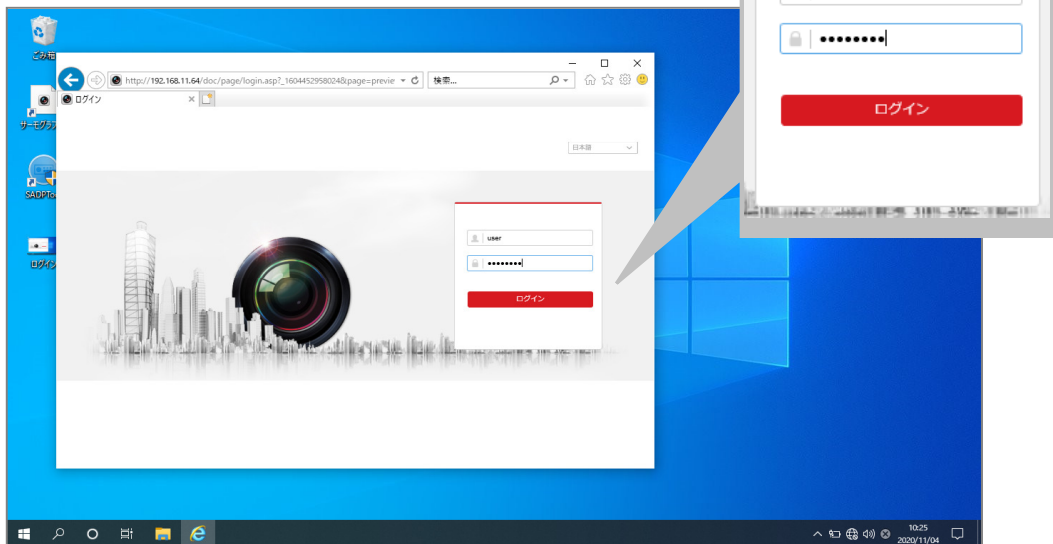

※上記画面ではなく、“ネットワークに接続されていません”という画面が表示された場合は、カメラが起動途中の可能性がありますが、一旦画面左上の×にて画面を閉じ、暫く待ってから、デスクトップ上の“サーモグラフィー”アイコンをクリックして下さい。
またはLANケーブルがカメラ・PC双方しっかり刺さっているか確認して下さい。

・ソフト起動後の画面

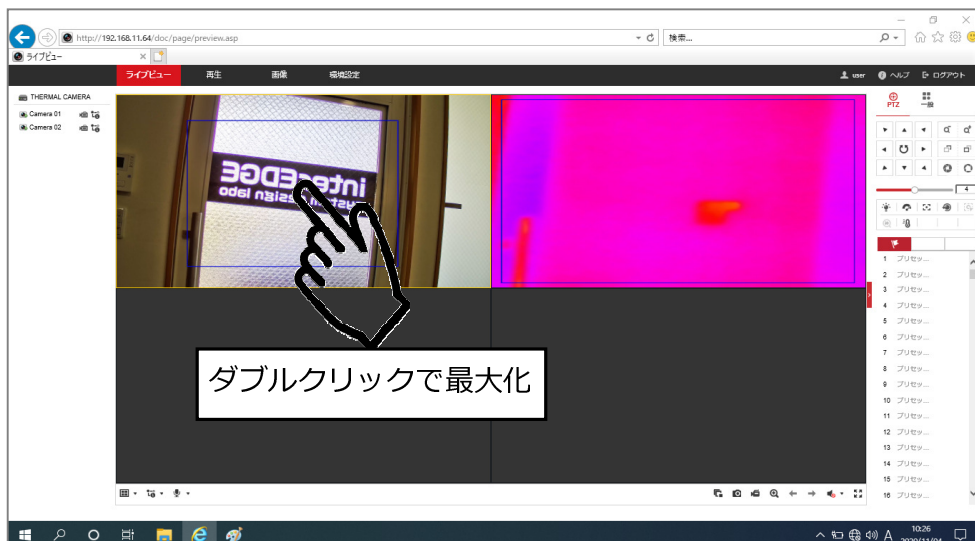

2画面に分割表示されます。

向かって右側がサーモグラフィ画面、左側が体温表示画面
一般的に左側体温表示画面を使用致します。

画面をダブルクリックすることで最大化することができます。



画面内の**青枠**（範囲の変更不可）に人が表示されると体温を検知致します。

最大化を終了する場合はキーボードのESCボタンを押して下さい。

【注意・禁止事項】

- ・カメラ⇔PCは必ず付属のLANケーブルを使用し、1対1で使用して下さい。
※他のネットワークへ繋ぐ事は厳禁です。
- ・PCは設置台をご用意頂き使用して下さい。
※床・地面への直置きは現金です。

【その他】

- ・傷について

2020/11/03現在、左記の写真の通り傷を確認しております。

こちらについては確認済みですので、気になさらないで下さい。

